



# Fisio Gun Pro

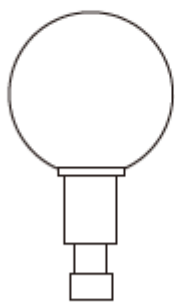


## **MANUAL DE USUARIO**

# I. Componentes del producto

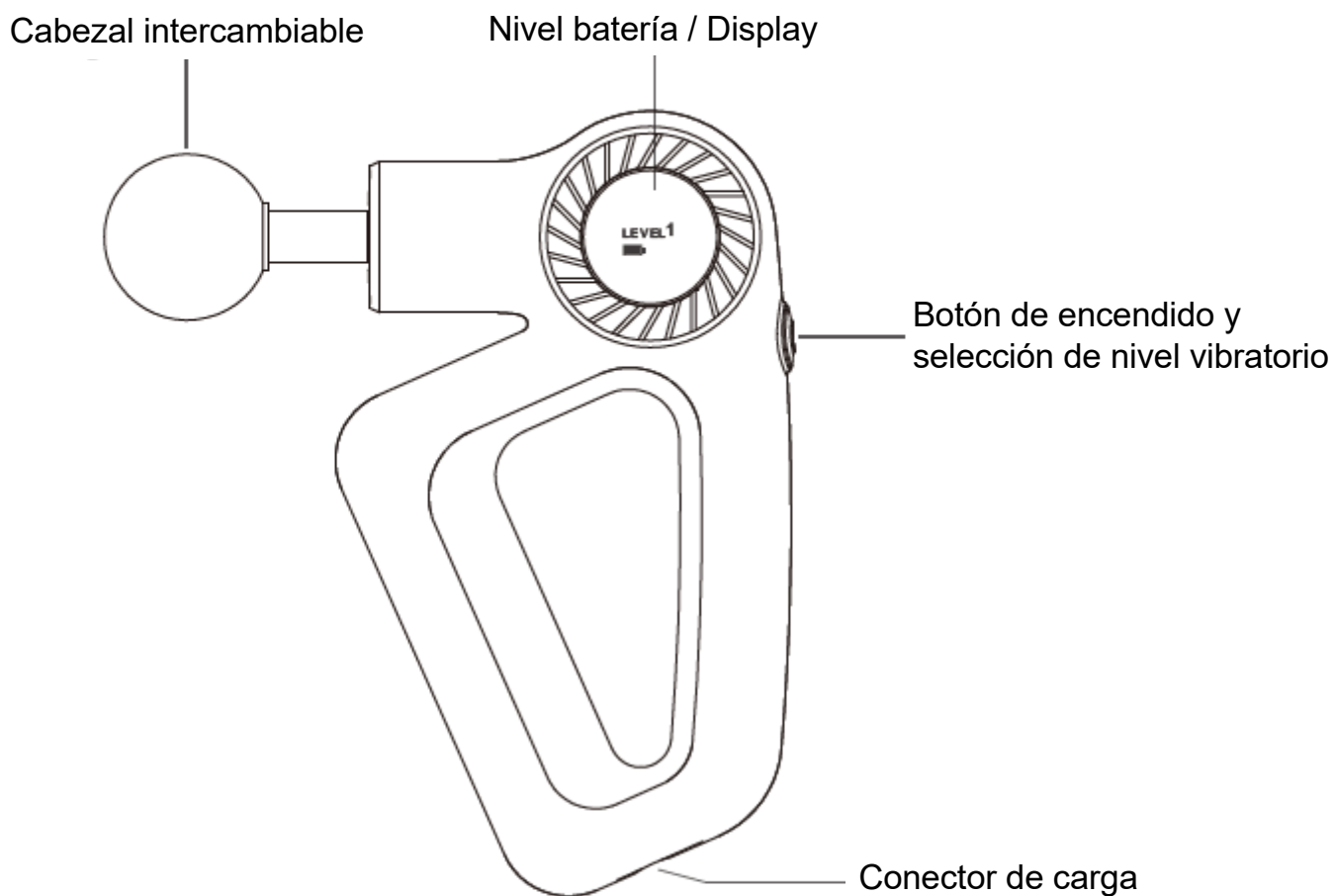


Cabezal en bola

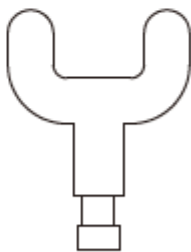

Cabezal en U



Cabezal en bala

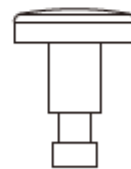

Cabezal plano

## II. Instrucciones de seguridad

- Para uso en personas adultas. No apto para ancianos.
- Si usted está lesionado, este producto solo puede ser utilizado por un profesional si él considera que puede ayudar en la mejora de su lesión. Nunca lo utilice por su cuenta estando lesionado.
- Su uso debe ser en movimiento por la zona afectada para ser efectivo, no lo use en un solo punto todo el tiempo sino que debe moverlo en pequeños círculos.
- No use el producto en tejido musculares lesionados.
- No lo utilice en la craneo, zona de huesos o cualquier parte dura del cuerpo.
- Utilícelos solo en zonas musculares secas y limpias.
- Mantenga sus dedos y su cabello alejados de la base del cabezal para evitar ser pellizcado por el movimiento del motor.
- No use el producto en áreas con poca musculatura o sobre zonas con hueso tipo la tibia, parte trasera de las manos, parte superior del pie, en la columna vertebral directamente o sobre cualquier parte del cráneo. **DIRECTAMENTE SOBRE HUESOS DÉBILES PUEDE CAUSAR FRACTURAS.**
- No lo utilice sobre zonas sensibles como los ojos, los dientes, el pecho en el esternón, genitales, etc...




Cualquier persona que: Esté embarazada o haya parido recientemente, que tenga problemas cardíacos o marcapasos, sufra de diabetes, epilepsia convulsiones, tumores, cáncer, flebitis y/o trombosis, disfunción articular, inflamación o lesiones, huesos débiles, osteoporosis, fiebre alta, columna vertebral anormal o curvada, con coágulos de sangre, con clavos/tornillos o con implantes articulares artificiales u otros dispositivos implantados en su cuerpo, que esté recibiendo tratamiento medico por lesiones. Todos ellos, **NO DEBEN USAR ESTE PRODUCTO.**

- Si detecta que usando el producto se irrita la piel deje de usarlo inmediatamente o haga menos presión sobre la zona a relajar.
- Deje de usar el producto si usted siente dolor y consulte el problema a su médico.
- Este producto esta diseñado para su uso doméstico y para relajar la musculatura. En ningún caso pretende ser un sustitutivo de la atención médica. Si usted tiene dolores consulte con su médico antes de usar este producto.
- No utilice cabezales no incluidos en este estuche.
- No desmonte o intente reparar este producto. Hacerlo incorrectamente le expone a posibles descargas eléctricas. Solo puede ser reparado por nuestro Servicio Técnico.
- Este producto no es resistente al agua así que no lo exponga a chorros de agua, no lo sumerja ni lo limpie con agua abundante. Para limpiarlo utilice una gamuza ligeramente húmeda y posteriormente pásele una totalmente seca.
- No bloquee las entradas de aire del producto mientras está en funcionamiento.
- Nunca deje el producto desatendido mientras está en carga. Si used no va a estar presente, desenchúfelo. Una vez cargado, desenchúfelo del cargador.
- No deje este producto en zonas de alta temperatura ni al sol durante una larga exposición.


- No utilice este producto ininterrumpidamente durante más de 30 minutos. Cuando lo utilice, déje que descanse el motor durante el mismo tiempo que haya sido usado antes de volver a utilizarlo. Así prolongará la vida del producto.
- Utilice este producto solo para el uso descrito en este manual.
- Reparaciones fuera del servicio técnico pueden ser perjudiciales para usted y anulan la garantía del producto.

## III. Cómo funciona

1. Por favor cargue completamente el producto antes de usarlo. La carga completa puede tardar unas 5h.
2. Para encenderlo presione durante 3 segundos el botón de encendido y el producto se encenderá.
3. Tiene 9 niveles de intensidad ajustables presionando con un 'click corto' el botón de encendido. Cuando llegue al nivel 9, si presión nuevamente pasará al nivel 1.
4. Después de 15 minutos de uso ininterrumpido se detendrá automáticamente. Esta función de protección no puede desactivarse. Si usted quiere seguir usándolo por favor vuelva a presionar durante 3 segundo el botón de encendido y recuerde que no debe utilizarlo sin pausa durante más de 30 minutos y debe dejar que el producto descanse por un tiempo igual que el utilizado antes de volver a usarlo.
5. Asegúrese que el cabezal se encuentra bien ubicado en su sitio antes de ponerlo en marcha.
6. Incluye 4 cabezales de masaje para ser usados según la zona del cuerpo.
7. Para poner, retirar o cambiar el cabezal, debe apagarse el equipo antes de realizar esta operación.

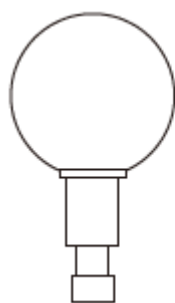


**Cabezal en bola:**  
Para masaje de brazo, espalda, nalgas, muslos, y pantorrillas.

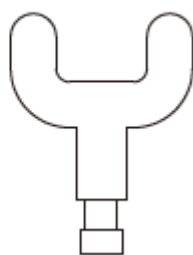

**Cabezal en U:**  
Para masaje de cuello, espalda, tendón de Aquiles.



**Cabezal en bala:**  
Para masaje de tejidos profundos.

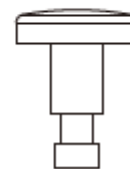

**Cabezal plano:**  
Para relajar cualquier parte de la musculatura

## IV. Carga de la batería

- Cargue totalmente el producto antes de usarlo.
- Conecte el cable USB a un adaptador de pared.
- En el display, el indicador de carga de la batería indicará que está en carga y dejará de estar intermitente cuando la carga sea completa.
- Cuando icono de la batería en el display le quede una sola raya y comience a parpadear intermitentemente indicará que el producto debe ser cargado por falta de batería.
- Antes de cargarlo, deje que el producto se enfríe para que la batería de encuentre en condiciones óptimas de carga. Esto alarga la vida del producto y evita averías.
- No se debe cargar la batería si esta se encuentra aún caliente.
- Tiempo de carga aproximado: 4,5h.
- Cuando esté cargado, por favor desenchúfelo de la pared.
- Puede cargarse a 12v si no dispone de enchufe en pared, aunque el tiempo de carga serán más horas.

## V. Especificaciones

DIMENSIONES	255 x 148 x 70 mm
PESO	875 grs
TIPO DE BATERÍA	LI-on
MODELO	OD882
TIEMPO DE CARGA	4,5h a 220v
IMPULSOS	5V 2A

## VI. Características

Fisio Gun PRO que permite relajar la rigidez muscular, creado para el masaje muscular después del ejercicio. Ayuda a reducir la rigidez muscular y aliviar la fatiga del músculo. Acelera la circulación sanguínea y ayuda a mejorar la salud general de los tejidos musculares del cuerpo.

## VIII. Garantía

Garantizamos este producto durante 2 años contra cualquier defecto de fabricación.

No garantizamos este producto si:

- Ha sido reparado o manipulado por personal ajeno a nuestro servicio técnico.
- Si ha sido indebidamente usado fuera de las recomendaciones de este manual de usuario.
- Si viene mojado en su interior.
- Si viene golpeado por una caída y eso ha producido daños en el interior.
- Si se ha utilizado con accesorios no incluidos en este estuche.
- Si se ha cargado a mas de 220v.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Sistemas Avantia s.l.

CIF: B85859692

Clara del Rey 55.

28020 Madrid

[info@sistemasavantia.com](mailto:info@sistemasavantia.com)